


SS29L ECG 用マルチリードケーブル

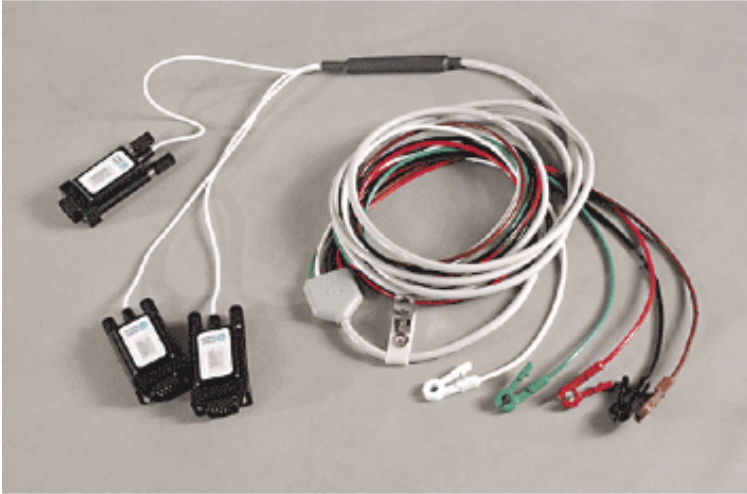

SS29L ECG 用マルチリードケーブルは、高解像度の ECG 記録を可能にします。このマルチリード線セットは、I 誘導、II 誘導、III 誘導、aVR、aVL、aVF に加えて、前胸部誘導 V (1~6) を同時に記録する事が可能です。12 誘導 ECG 記録は、位置 V1~V6 までの胸部誘導電極を交流することで得られます。ケーブルは MP3X に接続する 3 つのスマートセンサで終端します。

SS29L の使用

入力ケーブル長 :	2m
電極リード線長 :	1m
内部接続 :	ウィルソンターミナル内蔵
電極インタフェース :	標準のスナップコネクタ使い捨て電極 (EL503) に接続